

STAYSURE INSERT TIL FÆKAL INKONTINENS-
BRUGSANVISNING

BESKRIVELSE:

StaySure-Fecal Incontinence Insert til fækal inkontinens er en insert, der er beregnet til at hjælpe voksne patienter (18 år og ældre) og sundhedspersonale til at håndtere fækal inkontinens. StaySure-Fecal Incontinence Insert er designet til at forhindre ufrivillig lækage af afføring gennem analkanen.

ERKLÆRET FORMÅL:

StaySure-Fecal Incontinence Insert til fækal inkontinens er en prop, der er beregnet til at hjælpe voksne patienter, 18 år og ældre, og sundhedspersonale til at håndtere fækal inkontinens. StaySure-Fecal Incontinence Insert er designet til at afhjælpe den ufrivillige lækage af afføring gennem analkanen.

Det medicinske udstyr til engangsbrug indsættes via endetarmsåbningen i analkanen og rectum. Enheden går i indgreb med og tilpasser sig den anorektale forening og analkanen for at kontrollere uøstølst lækage af afføring.

INDIKATIONER FOR BRUG:

StaySure-Fecal Incontinence Insert til fækal inkontinens er indiceret til behandling af ufrivillig afføringslækage, som skyldes afføringsinkontinens. StaySure-Fecal Incontinence Insert er designet til at sætte ind for at forsegle og forebygge ufrivillig lækage af afføring fra rectum.

TILSIGTEDE BRUGERE:

StaySure-Fecal Incontinence Insert til fækal inkontinens er beregnet til at blive brugt af voksne patienter (18 år og ældre) og sundhedspersnale.

PATIENTMÅLGRUPPE (MÅLBEHANDLET POPULATION):

Voksne (18 år og ældre) med ufrivillig afføringslækage.

KLINISKE FORDELE:

StaySure-Fecal Incontinence Insert til fækal inkontinens er designet til at forhindre ufrivillig lækage af afføring gennem analkanen.

YDELSSEKARAKTERISTIKA:

StaySure-Fecal Incontinence Insert til fækal inkontinens tilpasser sig den anorektale forening og analkanen for at forhindre ufrivillig afføringslækage.

KONTRAINDIKATIONER:

StaySure-Fecal Incontinence Insert til fækal inkontinens er kontraindiceret til brug hos børn. Fækalinkontinensindsatsen er kontraindikeret til brug hos patienter med følgende tilstande:

- Anamnese med analfissur, klasse III-IV indvendige hæmorrhoider eller ekstern hæmorrhoider med trombose i løbet af de sidste 6 måneder
- Anal eller rektal smerte og/eller rektal blødning i løbet af den sidste måned
- Anamnese med fækalkomprimering med overblødsdiarré i løbet af de sidste 6 måneder
- Anamnese med lleo-anal pose

RISICI:

- Mulighed for mild irritation eller ubehag ved endetarmsåbningen eller analkanen
- Mulighed for migration eller forskydning af analproppen i analkanen og rectum
- Uventet udstødning

STØRRELSE:

StaySure-Fecal Incontinence Insert fås i flere størrelser. Det anbefales, at du begynder med den mindste størrelse, medmindre din læge har anviset andet. Hvis du i dine daglige gøremål oplever lækage, eller at analproppen uventet glider ud, skal du prøve en større størrelse.

BRUGSVARIGHED:

StaySure-Fecal Incontinence Insert kan anvendes kontinuertligt i op til 24 timer. En enkelt analprop kan anvendes indtil næste afføring eller skiftes, når det passer dig. Når en analprop er taget ud, udskrifter du den med en ny. Brug kun én analprop ad gangen.

INDFØRING:

- Vask dine hænder.
- Åbn pakningen, der indeholder analproppen, og tag proppen ud.
- Anbring dig i en aflappet, behagelig position, f.eks. liggende på en seng. Tag fat i applikatoren og analproppens holder. (A) Hold StaySure-Fecal Incontinence Insert ud for endetarmsåbningen.
- Slap af i dine muskler, og indfør forsigtigt StaySure-Fecal Incontinence Insert til fækal inkontinens, indtil holderen hviler på endetarmsåbningen (B) (C)
- Træk applikatoren ud, og kassér applikatoren og emballagen i restaffald (D)
- Vask dine hænder.

FJERNELSE:

StaySure-Fecal Incontinence Insert til fækal inkontinens er designet, så den kan udstådes med en normal afføring eller fjernes manuelt. Det anbefales, at StaySure-Fecal Incontinence Insert fjernes inden afføring. Sådan fjernes den manuelt:

- Tag fat i den eksterne holder, og træk forsigtigt for at fjerne StaySure-Fecal Incontinence Insert. (E)
- Kassér StaySure-Fecal Incontinence Insert i restaffald. Skylning af StaySure-Fecal Incontinence Insert eller dens applikator anbefales ikke.
- Vask dine hænder.

⚠ ADVARSLER OG FORBEHOLD:

- Fækal inkontinens kan behandles medicinsk. StaySure-Fecal Incontinence Insert til fækal inkontinens er ikke beregnet til at erstatte kirurgiske løsninger på med henblik på behandling af ufrivillig afføringslækage. Kontakt din læge for at få professionel rådgivning.
- Den er usteril og kun beregnet til engangsbrug. Genbrug af StaySure-Fecal Incontinence Insert kan resultere i brud på analproppen
- Må ikke anvendes, hvis emballagen er brudt eller beskadiget.
- Må ikke anvendes, hvis du har silikoneallergi.
- Må ikke bruges sammen med stikpiller.

AFBRYD BRUGEN AF STAYSURE FECAL INCONTINENCE INSERT TIL
FÆKAL INKONTINENS, OG KONTAKT DIN LÆGE, HVIS DU HAR:

- Blodig afføring eller blødning fra rectum
- Blødende hæmorrhoider
- Anal/rektal smerte, irritation, kramp, revner eller fissurer
- Forskydning af StaySure-Fecal Incontinence Insert til fækal inkontinens i analkanen eller rectum, som ikke er udstødt med den næste afføring
- Gennemgået rektal kirurgi inden for de sidste fi re uger.

Enhver alvorlig bivirkning, der opstår ved brugen af StaySure-Fecal Incontinence Insert til fækal inkontinens, skal rapporteres til producenten og din lokale sundhedsmyndighed.

DE

STAYSURE STUHLINKONTINENZ EINSATZ-
GEBRAUCHSANWEISUNG

BESCHREIBUNG:

Der StaySure Fecal Incontinence Insert ist ein rektal-analer Einsatz der Erwachsene (18 Jahre und älter) und Pflegepersonen beim Umgang mit Stuhlinkontinenz unterstützen soll. Das Produkt soll verhindern, dass ungewollt Stuhl aus dem Analkanal austritt.

VERWENDUNGSZWECK:

Der StaySure Fecal Incontinence Insert ist ein rektal-analer Einsatz, der erwachsene Menschen ab 18 Jahren und Pflegepersonen beim Umgang mit Stuhlinkontinenz unterstützen soll. Das Produkt soll dabei helfen, zu verhindern, dass ungewollt Stuhl aus dem Analkanal austritt. Das Medizinprodukt für den Einmalgebrauch wird über den Anus in den Analkanal und das Rektum eingeführt. Das Produkt wirkt an der anorektalen Übergangsstelle und dem Analkanal und passt sich dort an, um das ungewollte Austreten von Stuhl zu verhindern.

INDIKATIONEN:

Der Fecal Incontinence Insert ist für die Behandlung von ungewolltem Stuhlverlust (Accidental Bowel Leakage, ABL) aufgrund von Stuhlinkontinenz vorgesehen. Der Rektaleinsatz ist so konzipiert, dass er selbst eingeführt werden kann, um abzudichten und den ungewollten Stuhlverlust aus dem Rektum zu verhindern.

VORGESEHENE ANWENDER:

Der Fecal Incontinence Insert ist für die Verwendung durch Erwachsene (ab 18 Jahren) und Pflegepersonen vorgesehen.

PATIENTEN-ZIELGRUPPE (BEHANDELTE ZIELPOPULATION):

Erwachsene (18 Jahre und älter) mit ungewolltem Stuhlverlust.

KLINISCHE VORTEILE:

Der Fecal Incontinence Insert soll verhindern, dass unbeabsichtigt Stuhl aus dem Analkanal austritt.

LEISTUNGSMERKMALE:

Der Fecal Incontinence Insert passt sich dem anorektalen Übergang und dem Analkanal an, um einen ungewollten Stuhlverlust zu vermeiden.

KONTRAINDIKATIONEN:

Der Fecal Incontinence Insert ist für die Verwendung bei Kindern kontraindiziert.

Die Einlage für Stuhlinkontinenz ist für die Verwendung bei Patienten mit den folgenden Erkrankungen kontraindiziert:

- Analfissur, interne Hämorrhoiden des Grades III-IV oder thrombosierte externe Hämorrhoiden in den letzten 6 Monaten
- Anale oder rektale Schmerzen und/oder rektale Blutungen im letzten Monat
- Kotstau mit Überlaufdurchfall in den letzten 6 Monaten
- Ileoanaler Pouch in der Anamnese

RISIKEN:

- Mögliche leichte Reizung oder Beschwerden des Anus oder Analkanals
- Mögliche Wanderung oder Verschiebung des Einsatzes in den Analkanal und das Rektum
- Unerwarteter Ausstoß

GRÖSSE:

Der Fecal Incontinence Insert ist in mehreren Größen erhältlich. Es wird empfohlen, mit der kleinsten Größe zu beginnen, sofern Ihr Arzt Ihnen nichts anderes verordnet. Wenn es bei alltäglichen Aktivitäten zu Inkontinenzproblemen kommt oder das Produkt unerwartet ausgestoßen wird, versuchen Sie es mit einer größeren Größe.

TRAGEDAUER:

Der Fecal Incontinence Insert kann bis zu 24 Stunden lang ununterbrochen getragen werden. Ein Einsatz kann bis zum nächsten Stuhlgang getragen oder nach Belieben gewechselt werden. Nachdem ein Einsatz entfernt wurde, können Sie ihn durch einen anderen ersetzen. Es darf jeweils nur ein Einsatz verwendet werden.

EINFÜHREN:

- Waschen Sie Ihre Hände.
- Öffnen Sie die Verpackung des Fecal Incontinence Inserts und nehmen Sie den Einsatz heraus
- Nehmen Sie eine entspannte, bequeme Position ein, legen Sie sich beispielsweise auf Bett. Nehmen Sie den Applikator und den Halter in die Hand. (A) Richten Sie das Produkt in Richtung Anus aus.
- Entspannen Sie Ihre Muskeln und führen Sie den Fecal Incontinence Insert vorsichtig ein, bis der Halter den Anus berührt (B) (C).
- Ziehen Sie den Applikator heraus und entsorgen Sie ihn zusammen mit der Verpackung über den normalen Hausmüll (D).
- Waschen Sie Ihre Hände.

ENTFERNEN:

Der Fecal Incontinence Insert ist so konzipiert, dass er mit dem normalen Stuhlgang ausgeschieden oder manuell entfernt werden kann. Aus praktischen Gründen wird empfohlen, das Produkt vor dem Stuhlgang zu entfernen. Manuelles Entfernen:

- Fassen Sie den äußeren Halter und ziehen Sie vorsichtig daran, um das Produkt zu entfernen. (E)
- Entsorgen Sie das Produkt über den normalen Hausmüll. Es wird davon abgeraten, das Produkt oder den Applikator in

der Toilette herunterzuspielen.

- Waschen Sie Ihre Hände.

⚠ WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

Stuhlinkontinenz kann medizinisch behandelt werden. Der Fecal Incontinence Insert soll kein Ersatz für chirurgische Optionen zur Behandlung einer Stuhlinkontinenz sein. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um professionelle Hilfe zu erhalten.

- Das Produkt ist nicht steril und nur für den Einmalgebrauch bestimmt. Eine erneute Verwendung könnte das Produkt beschädigen.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Nicht verwenden, wenn Sie gegen Silikon allergisch sind.
- Nicht zusammen mit Zäpfchen verwenden.

BRECHEN SIE IN DEN FOLGENDEN FÄLLEN DIE VERWENDUNG
DES FECAL INCONTINENCE INSERT SOFORT AB UND WENDEN
SIE SICH AN IHREN ARZT:

- Blutiger Stuhl oder Blutungen aus dem Rektum
- Blutende Hämorrhoiden
- Schmerzen im Anal-/Rektalbereich, Reizungen, Krämpfe, Risse oder Fissuren
- Verlagerung des Fecal Incontinence Insert in den Analkanal oder das Rektum, sodass der Einsatz beim nächsten Stuhlgang nicht ausgeschieden wird
- Operation im Rektalbereich innerhalb der letzten 4 Wochen

Schwerwiegende Reaktionen, die bei Verwendung des Fecal Incontinence Insert auftreten, sollten dem Hersteller und Ihrer örtlichen Gesundheitsbehörde gemeldet werden.

EN

STAYSURE FECAL INCONTINENCE INSERT
INSTRUCTION FOR USE

DESCRIPTION:

The Fecal Incontinence Insert is a recto anal insert which is intended to assist adult patients (18 years and older) and caregivers in the management of fecal incontinence. The device is designed to prevent involuntary leakage of fecal matter through the anal canal.

INTENDED PURPOSE:

The Fecal Incontinence Insert is a recto anal insert which is intended to assist adult patients, 18 years and older, and caregivers in the management of fecal incontinence. The device is designed to help prevent the involuntary leakage of fecal matter through the anal canal. The single use medical device is inserted via the anus into the anal canal and rectum. The device engages with and conforms to the anorectal junction and the anal canal to control the accidental leakage of fecal matter.

INDICATIONS FOR USE:

The Fecal Incontinence Insert is indicated for the management of Accidental Bowel Leakage (ABL) due to bowel incontinence. The rectal insert is designed for self-insertion to seal and help prevent the involuntary leakage of stool from the rectum.

INTENDED USERS:

The Fecal Incontinence Insert is intended to be used by adult patients (18 years and older) and caregivers.

PATIENT TARGET GROUP TARGET TREATED POPULATION:

Adults (18 years and older) with accidental bowel leakage.

CLINICAL BENEFITS:

The Fecal Incontinence Insert is designed to prevent involuntary leakage of fecal matter through the anal canal.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS:

The Fecal Incontinence Insert conforms to the anorectal junction and anal canal to prevent accidental bowel leakage.

CONTRAINDICATIONS:

The Fecal Incontinence Insert is contraindicated for use in the pediatric population.

The Fecal Incontinence Insert is contraindicated for use in patients with the following conditions:

- History of an anal fissure, Grade III-IV internal hemorrhoids, or thrombosed external hemorrhoids in the past 6 months
- Anal or rectal pain and/or rectal bleeding in the past month
- History of fecal impaction with overflow diarrhea in the past 6 months
- History of ileo-anal pouch

RISKS:

- Possible mild irritation or discomfort of the anus or anal canal
- Possible migration or displacement of the insert into the anal canal and rectum
- Unexpected expulsion

SIZING:

The Fecal Incontinence Insert comes in multiple sizes. It is recommended that you begin with the smallest size unless otherwise instructed by your physician. Upon engaging in daily activities, if you experience leakage or the device comes out unexpectedly, try a larger size.

LENGTH OF WEAR:

The Fecal Incontinence Insert may be worn continuously for up to 24 hours. A single insert may be worn until your next bowel movement or changed as you see fit. After one insert has been expelled, you may replace it with another. Only one insert may be used at a time.

INSERTION:

- Wash your hands.
- Open the Fecal Incontinence Insert package and remove the device.
- Place yourself in a relaxed, comfortable position, such as lying on a bed. Grasp the applicator and device retainer. (A) Align the device with the anus.
- Relax your muscles and gently insert the Fecal Incontinence Insert until the retainer rests on the anus (B) (C)
- Withdraw the applicator and discard the applicator and packaging with the normal trash (D)
- Wash your hands.

REMOVAL:

The Fecal Incontinence Insert is designed so that it may be expelled with a normal bowel movement or manually removed. For convenience, it is recommended that the device be removed before a bowel movement. To manually remove:

- Grasp the external retainer and gently pull to remove the device. (E)
- Discard the device with the normal trash. Flushing of the device or device applicator is not recommended.
- Wash your hands.

⚠ WARNINGS AND PRECAUTIONS:

Fecal Incontinence may be medically treated. The Fecal Incontinence Insert is not intended to replace surgical options to treat accidental bowel leakage. Consult your physician for professional advice.

- This device is non-sterile and for single use only. Reuse of the device could result in device breakage.
- Do not use if the package is open or damaged.
- Do not use if you have a silicone allergy.
- Do not use with suppositories.

DISCONTINUE USE OF THE FECAL INCONTINENCE INSERT AND
CONSULT YOUR PHYSICIAN IF YOU HAVE:

- Bloody stool or bleeding from the rectum
- Bleeding hemorrhoids
- Anal/rectal pain, irritation, spasms, tearing, or fissure
- Displacement of the Fecal Incontinence Insert into the anal canal or rectum which has not been expelled with the next bowel movement
- Undergone rectal surgery within the last 4 weeks.

Any serious reaction occurring when using the Fecal Incontinence Insert should be reported to the manufacturer and your local health authority.

ES

STAYSURE INSERT, OBTURADOR DE INCONTINENCIA
FECAL: INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN:

El Obturador de Incontinencia Fecal es un obturador anal diseñado para ayudar a pacientes adultos (de 18 años en adelante) y a sus cuidadores en el tratamiento de la incontinencia fecal. El dispositivo está diseñado para prevenir la fuga involuntaria de heces a través del canal anal.

USO PREVISTO:

El Obturador de Incontinencia Fecal es un obturador anal diseñado para ayudar a pacientes adultos, de 18 años en adelante, y a sus cuidadores en el tratamiento de la incontinencia fecal. El dispositivo está diseñado para ayudar a prevenir la fuga involuntaria de heces a través del canal anal.

El dispositivo médico de un solo uso se introduce a través del ano, en el canal anal y el recto. El dispositivo se ajusta y se adapta a la unión anorrectal y al canal anal para controlar la fuga accidental de heces.

INDICACIONES DE USO:

El Obturador de Incontinencia Fecal está indicado para el tratamiento de fugas accidentales de heces (FAH) debidas a incontinencia fecal. El obturador anal está diseñado para la auto inserción, para sellar y ayudar a prevenir la fuga involuntaria de heces desde el recto.

USUARIOS A LOS QUE SE DESTINA:

El Obturador de Incontinencia Fecal está diseñado para que lo utilicen pacientes adultos (de 18 años en adelante) y cuidadores.

GRUPO OBJETIVO DE PACIENTES (POBLACIÓN OBJETIVO
TRATADA):

Adultos (de 18 años en adelante) con fugas accidentales de heces.

BENEFICIOS CLÍNICOS:

El Obturador de Incontinencia Fecal está diseñado para prevenir la fuga involuntaria de heces a través del canal anal.

CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA:

El Obturador de Incontinencia Fecal se adapta a la unión anorrectal y al canal anal para evitar fugas accidentales de heces.

CONTRAINDICACIONES:

El Obturador de Incontinencia Fecal está contraindicado para su uso en la población pediátrica.

El uso del prospecto para incontinencia fecal está contraindicado para pacientes con las siguientes afecciones:

- Antecedentes de fisura anal, hemorroides internas de grado III-IV o hemorroides externas trombadas en los últimos 6 meses
- Dolor anal o rectal y/o sangrado rectal en el último mes
- Antecedentes de impacción fecal con diarrea por rebosamiento en los últimos 6 meses
- Antecedentes de saco ileal-anal

RIESGOS:

- Possible irritación o malestar leve en el ano o en el canal anal.
- Possible migración o desplazamiento del obturador hacia el canal anal y el recto.
- Expulsión inesperada

TAMAÑO:

El Obturador de Incontinencia Fecal se presenta en varios tamaños. Se recomienda comenzar con el tamaño más pequeño a menos que su médico le indique lo contrario. Al realizar actividades diarias, si experimenta fugas o el dispositivo se sale inesperadamente, pruebe con un tamaño más grande.

DURACIÓN DEL USO:

El Obturador de Incontinencia Fecal se puede usar de forma continua hasta 24 horas. Puede usar un solo obturador hasta su próxima evacuación intestinal o cambiarlo cuando mejor le parezca. Una vez expulsado un obturador, podrá reemplazarlo por otro. Sólo se puede utilizar un obturador a la vez.

INSERCIÓN:

- Lávese las manos.
- Abra el envase del Obturador de Incontinencia Fecal y extraiga el dispositivo.
- Colóquese en una posición relajada y cómoda, como acostado en una cama. Sujete el aplicador y el retenedor del dispositivo. (A) Alinee el dispositivo con el ano.

- Relaje sus músculos e introduzca suavemente el Obturador de Incontinencia Fecal hasta que el retenedor descanse sobre el ano (B) (C)
- Retire el aplicador y deséchelo junto con el embalaje en la basura doméstica (D)
- Lávese las manos.

RETIRADA:

El Obturador de Incontinencia Fecal está diseñado para que pueda expulsarse con una evacuación intestinal normal o retirarse manualmente. Para mayor comodidad, se recomienda retirar el dispositivo antes de defecar. Para retirar manualmente:

- Sujete el retenedor externo y tire suavemente para retirar el dispositivo. (E)
- Deseeche el dispositivo con la basura doméstica. No se recomienda tirar por el inodoro el dispositivo ni su aplicador.
- Lávese las manos.

⚠ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

La incontinencia fecal puede tratarse médicamente. El Obturador de Incontinencia Fecal no pretende reemplazar las opciones quirúrgicas para tratar la fuga de heces accidental. Consulte a su médico para obtener asesoramiento profesional.

- Este dispositivo no es estéril y es de un solo uso. La reutilización del dispositivo podría provocar su rotura.
- No utilizar si el paquete está abierto o dañado.
- No utilizar si tiene alergia a la silicona.
- No utilizar con supositorios.

DEJE DE USAR EL OBTURADOR DE INCONTINENCIA FECAL Y
CONSULTE A SU MÉDICO SI TIENE:

- Heces con sangre o sangrado del recto
- Hemorroides con sangre
- Dolor anal/rectal, irritación, espasmos, desgarro o fisura
- Desplazamiento del Obturador de Incontinencia Fecal en el canal anal o recto que no ha sido expulsado con la siguiente evacuación intestinal.
- Se ha sometido una cirugía rectal en las últimas 4 semanas.

Cualquier reacción grave que ocurra al usar el Obturador de Incontinencia Fecal se debe notificar al fabricante y a las autoridades sanitarias locales.

PT

TAMPÃO PARA INCONTINÊNCIA FECAL STAYSURE-
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO:

O tampão para incontinência fecal é uma inserção reto-anal que se destina a ajudar pacientes adultos (18 anos ou mais) e cuidadores no tratamento da incontinência fecal. O dispositivo foi concebido para evitar a fuga involuntária de matéria fecal através do canal anal.

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

O Tampão para incontinência fecal é uma inserção reto-anal que se destina a ajudar pacientes adultos, de 18 anos ou mais, e cuidadores no tratamento da incontinência fecal. O dispositivo foi concebido para ajudar a evitar a fuga involuntária de matéria fecal através do canal anal. O dispositivo médico de utilização única é inserido através do ânus no canal anal e reto. O dispositivo encaixa-se e adapta-se à junção anorretal e ao canal anal para controlar a fuga acidental de matéria fecal.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

O Tampão para incontinência fecal é indicado para o tratamento de Perda fecal acidental (PPA) devido à incontinência intestinal. O tampão anal foi concebido para inserção automática para vedar e ajudar a prevenir a fuga involuntária de fezes do reto.

UTILIZADORES PREVISTOS:

O Tampão para incontinência fecal destina-se a ser utilizado por pacientes adultos (18 anos ou mais) e cuidadores.

GRUPO ALVO DE PACIENTES (POPLUÇÃO ALVO TRATADA):

Adultos (18 anos ou mais) com perda fecal acidental.

BENEFÍCIOS CLÍNICOS:

O Tampão para incontinência fecal foi concebido para evitar a fuga involuntária de matéria fecal através do canal anal.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO:

O Tampão anal para incontinência fecal adapta-se à junção anorretal e ao canal anal para evitar fugas intestinais acidentais.

CONTRAINDICAÇÕES:

O Tampão anal para incontinência fecal é contraindicado para utilização na população pediátrica.

O Tampão para incontinência fecal está contraindicado para utilização em doentes com as seguintes condições:

- Antecedentes de fissura anal, hemorroidas internas de grau III-IV ou hemorroidas externas trombadas nos últimos 6 meses
- Dor anal ou retal e/ou sangramento retal no último mês
- Antecedentes de impactação fecal com diarreia por transbordamento nos últimos 6 meses
- Antecedentes de bolsa ileo-anal

RISCOS:

- Possível irritação ou desconforto ligeiro no ânus ou no canal anal
- Possível migração ou deslocamento do tampão para o canal anal e reto
- Expulsão inesperada

TAMANHOS:

O Tampão anal para incontinência fecal é fornecido em vários tamanhos. Recomenda-se que comece pelo tamanho mais pequeno, a menos que receba instruções em contrário por parte do seu médico. Ao realizar atividades diárias, se ocorrer fuga ou se o dispositivo sair inesperadamente, experimente um tamanho maior.

DURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO:

O Tampão anal para incontinência fecal pode ser usado continuamente durante até 24 horas. Um tampão pode ser usado até a próxima evacuação ou trocado conforme achar necessário. Após a expulsão de um tampão, poderá substituí-lo por outro. Pode utilizar apenas um tampão de cada vez.

INSERÇÃO:

- Lave bem as mãos.
- Abra a embalagem do Tampão para incontinência fecal e remova o dispositivo.
- Coloque-se numa posição descontrainda e confortável, como deitado na cama. Segure o aplicador e o retenedor do dispositivo. (A) Alinee o dispositivo com o ânus.
- Relaxe os músculos e insira suavemente o Tampão anal para incontinência fecal até que o retenitor fique colocado no ânus (B) (C)
- Retire o aplicador e coloque-o no lixo normal tal como a embalagem. (D)
- Lave bem as mãos.

REMOÇÃO:

O tampão para incontinência fecal foi concebido de forma a que possa ser expelido com uma evacuação normal ou removido manualmente. Para maior comodidade, recomenda-se que o dispositivo seja removido antes da evacuação. Para remover manualmente:

STAYSURE ULOSTEINKONTINENSSITAMPONI-KÄYTTÖOHJE

KUVAUS:

Ulosteinkontinenssitamponi on rektaalitamponi, joka on tarkoitettu auttamaan aikuisia potilaita (vähintään 18-vuotiaat) ja hoitajia ulosteinkontinenssin hoidossa. Tuote on suunniteltu estämään ulosteen tahaton karkailu.

KÄYTTÖTARKOITUKSET:

Ulosteinkontinenssitamponi on rektaalitamponi, joka on tarkoitettu auttamaan aikuisia potilaita (vähintään 18-vuotiaat) ja hoitajia ulosteinkontinenssin hoidossa. Tuote on suunniteltu estämään ulosteen tahaton karkailu. Kertäkäyttöinen lääkinällinen tuote asetetaan peräaukon kautta anaalikanavaan ja peräsuoleen. Tuote asetettu peräsuolen ja peräaukon liitoskanavaan ja anaalikanavaan niiden muotoon mukautuen ja estää ulosteen tahattoman karkailun.

KÄYTTÖAIHEET:

Ulosteinkontinenssitamponi on tarkoitettu ulosteinkontinenssista johtuvan tahattoman ulosteen karkailun hoitoon. Rektaalitamponi on suunniteltu itse paikalleen asetttavaksi ja sitä käytetään estämään tahaton ulosteen karkailu peräsuolesta.

KÄYTTÄJÄKOHDERYHMÄ:

Ulosteinkontinenssitamponi on tarkoitettu aikuisten potilaiden (vähintään 18-vuotiaiden) ja hoitajien käyttöön.

POTILASKOHDERYHMÄ:

Aikuiset (vähintään 18-vuotiaat), joilla uloste karkaaile.

KLIINISET HYÖDYT:

Ulosteinkontinenssitamponi on suunniteltu estämään ulosteen tahaton karkailu.

SUORITUSKYKYMINAISUUDET:

Ulosteinkontinenssitamponi mukautuu peräsuolen ja peräaukon liitoskanavan ja anaalikanavan muotoon ja estää ulosteen tahattoman karkailun.

KONTRAIINDIKAATIOT:

Ulosteinkontinenssitamponi on vasta-aiheinen lapsipotilaille.

Fecal Incontinence Insert:rektaalitampoin käyttö on vasta-aiheista potilaille, joilla on seuraavia tiloja:

- Peräaukko fissuura, asteen III-IV sisäiset peräaukumat tai umpeen hyttynyt ulkoiset peräpukamat viimeisten 6 kuukauden aikana
- Peräaukon tai peräsuolen kipua ja/tai peräsuolen verenvuotoa viimeisen kuukauden aikana
- Ulostekovettumaa ja ohivuotoripuli viimeisten 6 kuukauden aikana
- Aliempi ileoanaalinen pussi

RISKIT:

- Mahdollinen peräaukon tai anaalikanavan lievä ärsytys tai epämukavuus
- Rektaalitampoinin mahdollinen siirtyminen anaalikanavaan ja peräsuoleen
- Odottamaton ulos työntyminen

KOON MÄÄRITTÄMINEN:

Ulosteinkontinenssitamponia on kahta eri kokoa. On suositeltavaa aloittaa pienemmällä koolla, ellei asiantuntija toisin määrää. Jos havaitset karkailua tai rektaalitampoini kytteä odottamattomasti ulos päivitiltäisten toimien aikana, kokeile suurempaa kokoa.

KÄYTÖN KESTO:

Ulosteinkontinenssitamponia voidaan käyttää yhtäjaksoisesti korkeintaan 24 tuntia. Yksittäistä rektaalitamponia voidaan käyttää seuraavaan WC-käyntiin asti tai se voidaan vaihtaa tarpeen mukaan. Kun yksi rektaalitamponi on poistettu, voit korvata sen uudella. Voit käyttää vain yhtä rektaalitamponia kerrallaan.

ASETAMINEN:

- Pese kätesi.
- Avaa ulosteinkontinenssitampoinin pakkaus ja ota rektaalitampoini pakkauksesta.
- Pida asettimesta ja rektaalitampoinin pitimestä kiinni. (A) Kohdista rektaalitampoini kohti peräaukkoa.
- Rentouta lihaksesi ja aseta ulosteinkontinenssitampoini varovasti sisään, kunnes pidin lepää peräaukossa (B) (C)
- Vedä asetin pois, hävitä asetin ja pakkaus sekajätteen mukana (D)
- Pese kätesi.

POISTAMINEN:

Ulosteinkontinenssitamponi on suunniteltu siten, että se voidaan poistaa ulostamisen yhteydessä tai käsin ulos vetämällä. Mukavuuden vuoksi on suositeltavaa poistaa rektaalitampoini ennen WC-käyntiä. Väsin poistaminen:

- Tartu ulkoiseen pitimeen ja vedä rektaalitampoini ulos varovasti. (E)
- Hävitä tuote sekajätteen mukana. Tuotteen tai asettimen huhtelua WC-pönttöön ei suositella.
- Pese kätesi.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET:

- Ulosteinkontinenssitamponia voidaan hoitaa lääketieteellisesti.
- Ulosteinkontinenssitamponia ei ole tarkoitettu korvaamaan tahattoman ulosteen karkailun kirurgisia hoitovaihtoehtoja. Kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta.
- Tuote on epästabiili ja kertäkäyttöinen. Uudelleenkäyttö voi johtaa tuotteen rikkoutumiseen.
- Ei saa käyttää, jos pakkaus on valmiiksi avattu tai vahingoittunut.
- Älä käytä tuotetta, jos sinulla on silikonallergia.
- Ei saa käyttää peräpukkojen kanssa.

LOPETA KÄYTTÖINKONTINENSSITAMPONIN KÄYTTÖ JA OTA YHTEYS TERVEYDENHUOLLOON AMMATILLAISEEN, JOS SINULLA ON:

- verta ulosteessa tai verenvuotoa peräsuolesta
- verta vuotavia peräpukamia
- peräaukon/peräsuolen kipua, ärsytystä, kouristuksia, repeämiä tai haavaumia
- anaalikanavaan tai peräsuoleen siirtynyt ulosteinkontinenssitampoini, joka ei ole poistunut seuraavan WC-käynnin yhteydessä

- du sang dans les selles ou un saignement du rectum
- des hémorroides saignantes
- une douleur, une irritation, des spasmes, une déchirure ou une fissure au niveau de l'anus ou du rectum
- un déplacement de l'insert d'incontinence fécale dans le canal anal ou le rectum (l'insert n'a pas été expulsé lors des selles suivantes)
- subi une chirurgie rectale au cours des 4 dernières semaines.

Toute réaction grave survenant pendant l'utilisation de l'insert d'incontinence fécale doit être signalée au fabricant et aux autorités sanitaires locales.

STAYSURE INSERTO PER INCONTINENZA FECALE-ISTRUZIONI PER L'USO

DESCRIZIONE:

L'inserto per incontinenza fecale è un inserto retto-aleale destinato ad assistere i pazienti adulti (dal 18 anni in poi) e gli operatori sanitari nella gestione dell'incontinenza fecale. Il dispositivo è progettato per aiutare a prevenire la perdita involontaria di materia fecale attraverso il canale anale.

USO MEDICO PREVISTO:

L'inserto per incontinenza fecale è un inserto retto-aleale destinato ad assistere i pazienti adulti (dal 18 anni in poi) e gli operatori sanitari nella gestione dell'incontinenza fecale. Il dispositivo è progettato per aiutare a prevenire la perdita involontaria di materia fecale attraverso il canale anale. Il dispositivo medico monouso viene inserito attraverso l'ano nel canale anale e nel retto. Il dispositivo si inserisce e si adatta alla giunzione anorettale e al canale anale per controllare la perdita accidentali di materia fecale.

INDICAZIONI PER L'USO:

L'inserto per incontinenza fecale è indicato per la gestione delle perdite accidentali di feci (ABL/Accidental Bowel Leakage) dovute all'incontinenza intestinale. L'inserto rettale è progettato per l'auto-inserimento al fi ne di sigillare il retto e prevenire la perdita involontaria di feci.

DESTINATARI D'USO:

L'inserto per incontinenza fecale è destinato all'uso da parte di pazienti adulti (di età pari o superiore a 18 anni) e di chi li assiste.

GRUPPO TARGET DI PAZIENTI (POPOLAZIONE TARGET TRATTATA):

Adulti (di età pari o superiore a 18 anni) con perdite accidentali di feci.

CONTRE INDICAZIONI:

L'utilisation de l'insert pour incontinence fécale est contre-indiquée dans la population pédiatrique.

L'insert pour l'incontinence fécale est contre-indiquée chez les patients présentant les conditions suivantes :

- Antécédents de fissure anale, d'hémorroides internes de grade III-IV ou d'hémorroides externes thrombosées au cours des 6 derniers mois
- Douleur anale ou rectale et/ou rectorragie au cours du dernier mois
- Antécédents d'impaction fécale avec fausse diarrhée au cours des 6 derniers mois
- Antécédents de poche iléoanale

RISQUES:

- Légère irritation ou inconfort possible au niveau de l'anus ou du canal anal
- Migration ou déplacement possible de l'insert dans le canal anal et le rectum
- Expulsion inattendue

TAILLE:

L'insert pour incontinence fécale est disponible en plusieurs tailles. Il est recommandé de commencer par la taille la plus petite, sauf indication contraire de votre médecin. Lors de vos activités quotidiennes, si vous constatez une fuite ou si le dispositif est expulsé de manière inattendue, essayez une taille plus grande.

DURÉE D'UTILISATION:

L'insert pour incontinence fécale peut être porté en continu pendant 24 heures maximum. Il peut être porté jusqu'aux prochaines selles ou changé quand vous le souhaitez. Lorsque l'insert a été expulsé, vous pouvez le remplacer par un autre. Un seul insert peut être utilisé à la fois.

INSERTION:

- Lavez-vous les mains.
- Ouvrez l'emballage de l'insert pour incontinence fécale et sortez le dispositif.
- Placez-vous dans une position détendue et confortable, par exemple allongez-vous sur un lit. Saisissez l'applicateur et le dispositif de retenue. (A) Alignez le dispositif avec l'anus.
- Détendez vos muscles et insérez doucement l'insert pour incontinence fécale jusqu'à ce que le dispositif de retenue soit en contact avec l'anus (B) et (C)
- Retirez l'applicateur et jetez-le avec l'emballage dans les ordures ménagères (D).
- Lavez-vous les mains.

RETRAIT:

L'insert pour incontinence fécale est conçu de manière à pouvoir être expulsé avec des selles normales ou être retiré manuellement. Pour plus de commodité, il est recommandé de retirer le dispositif avant d'aller à la selle. Pour le retirer manuellement :

- Saisissez le dispositif de retenue externe et tirez doucement pour retirer le dispositif (E).
- Jetez le dispositif dans les ordures ménagères. Il n'est pas recommandé de laver le dispositif ou l'applicateur.
- Lavez-vous les mains.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS:

- L'incontinence fécale peut être traitée médicalement. L'insert pour incontinence fécale n'est pas destiné à remplacer les options chirurgicales pour traiter les fuites accidentelles de matières fécales. Consultez votre médecin pour obtenir des conseils professionnels.
- Ce dispositif est non stérile et est à usage unique. La réutilisation du dispositif pourrait entraîner sa casse.
- Ne pas utiliser si l'emballage est déjà ouvert ou endommagé.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie au silicone.
- Ne pas utiliser avec des suppositoires.

CESSEZ D'UTILISER L'INSERT POUR INCONTINENCE FECALE ET CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ:

- Questo dispositivo non è sterile ed è monouso. Il riutilizzo del dispositivo potrebbe causarne la rottura.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.
- Non utilizzare in caso di allergia al silicone.
- Non utilizzare con supposte.

INTERROMPERE L'USO DELL'INSERTO PER L'INCONTINENZA FECALE E CONSULTARE IL PROPRIO MEDICO IN CASO DI:

- Feci con sangue o sanguinamento dal retto
- Emorroidi sanguinanti
- Dolore anale/rettale, irritazione, spasmi, lacerazioni o ragadi
- Spostamento nel canale anale o nel retto dell'inserto per incontinenza fecale che non è stato espulso con il successivo movimento intestinale
- Intervento chirurgico rettale nelle ultime 4 settimane.

Qualsiasi reazione avversa grave che si verifichi utilizzando l'inserto per incontinenza fecale deve essere riferita al produttore e all'autorità sanitaria locale.

STAYSURE FECAL INCONTINENCE INSERT-BRUKSANSANWIJZING

BESCHRIJVING:

De Fecal Incontinence Insert is een anaalplug die bedoeld is om volwassen patiënten (18 jaar en ouder) en verzorgers te helpen bij het voorkomen van fecale incontinentie. Het hulpmiddel is ontworpen om ongewild ontlastingsverlies te voorkomen.

BEOOGD GEBRUIK:

De Fecal Incontinence Insert is een anaalplug die bedoeld is om volwassen patiënten, van 18 jaar en ouder, en verzorgers te helpen bij het voorkomen van fecale incontinentie. Het hulpmiddel is ontworpen om ongewild ontlastingsverlies via de anus te voorkomen. Het medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik wordt via de anus in het anale kanaal en het rectum ingebracht. Het hulpmiddel sluit aan op en vormt zich naar het anale kanaal en de anorectale overgang om ongewild ontlastingsverlies te voorkomen.

INDICATIES VOOR GEBRUIK:

De Fecal Incontinence Insert is geïndiceerd om ongewild ontlastingsverlies als gevolg van fecale incontinentie te voorkomen. De anaalplug is ontworpen om zelf in te brengen.

BEOOGD GEBRUIK:

De anaalplug is bedoeld voor gebruik door volwassen patiënten (18 jaar en ouder) en zorgverleners.

PATIENTENDOELGROEP (BEHANDELDE DOELGROEP):

Volwassenen (18 jaar en ouder) met ongewild ontlastingsverlies.

KLINISCHE VOORDELEN:

De Fecal Incontinence Insert is ontworpen om ongewild ontlastingsverlies via de anus te voorkomen.

PRESTATIEKENMERKEN:

De Fecal Incontinence Insert past zich aan het anale kanaal en de anorectale overgang aan om ongewild ontlastingsverlies te voorkomen.

CONTRA INDICATIES:

De Fecal Incontinence Insert is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen.

De insert voor fecale incontinentie is gecontra-indiceerd voor gebruik bij patiënten met de volgende aandoeningen:

- Voorgeschiedenis van een anale fissuur, grad III-IV invengende hemorroiden of trombose van uitwendige hemorroiden in de afgelopen 6 maanden
- Anale of rectale pijn en/of rectale bloeding in de afgelopen maand
- Voorgeschiedenis van fecale impactie met overloppendiaree in de afgelopen 6 maanden
- Voorgeschiedenis van de ileo-aleale pouch

RISICO'S:

- Mogelijke lichte irritatie of enig ongemak van de anus of het anale kanaal
- Mogelijke migratie of verplaatsing van de plug naar het anale kanaal en het rectum
- Onverwachte verwijdering

MATEN:

De Fecal Incontinence Insert is in twee maten verkrijgbaar. Het wordt aanbevolen om met de kleinste maat te beginnen, tenzij anders voorgeschreven door uw arts. Probeer de grotere maat als u bij dagelijkse activiteiten de last ervaart van lekkage of als het hulpmiddel onverwacht naar buiten komt.

DRAAGDUUR:

De Fecal Incontinence Insert mag maximaal 24 uur achter elkaar worden gedragen. Uit de applicator en het uiteinde van het hulpmiddel of u kunt de plug naar eigen inzicht verwisselen. Nadat een plug is verwijderd, kunt u deze door een nieuwe plug vervangen. Er mag slechts één plug tegelijk worden gebruikt.

INBRENGEN:

- Was uw handen.
- Open de verpakking met de Fecal Incontinence Insert en haal het hulpmiddel eruit.
- Neem een ontspannen, comfortabele houding aan. Ga bijvoorbeeld op een bed of liggen. Pak de applicator en het uiteinde van het hulpmiddel vast. (A) Houd het hulpmiddel op een gelijke lijn met de anus.
- Ontspan uw spieren en breng de Fecal Incontinence Insert voorzichtig in totdat het uiteinde tegen de anus aan zit (B) (C).
- Trek de applicator terug en gooi de applicator en de verpakking weg bij het normale afval.
- Was uw handen.

VERWIJDEREN:

De Fecal Incontinence Insert is zo ontworpen dat deze er bij een normale stoelgang uitkomt of handmatig kan worden verwijderd. Het wordt aanbevolen om het hulpmiddel vóór de stoelgang handmatig te verwijderen. Handmatig verwijderen:

- Pak het externe uiteinde vast en trek voorzichtig om het hulpmiddel te verwijderen. (E)

- Cool het hulpmiddel bij het normale afval weg. Spoel het hulpmiddel of de applicator van het hulpmiddel niet door het toilet.
- Was uw handen.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN:

Fecale incontinentie kan medisch worden behandeld. De Fecal Incontinence Insert is niet bedoeld ter vervanging van chirurgische ingrepen om ongewild ontlastingsverlies te behandelen. Raadpleeg uw arts voor professioneel advies.

- Dit hulpmiddel is niet steriel en is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Door hergebruik van het hulpmiddel kan het hulpmiddel defect raken.
- Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is.
- Niet gebruiken als u allergisch bent voor siliconen.
- Niet gebruiken in combinatie met zetpillen.

STOP MET HET GEBRUIK VAN DE FECAL INCONTINENCE INSERT EN RAADPLEEG UW ARTS BIJ HET VOLGENDE:

- Bloederige ontlasting of bloeding uit het rectum
- Bloedende aambeien
- Anale of rectale pijn, irritatie, spiersamentrekkingen, scheurtjes of kloven
- Als de Fecal Incontinence Insert naar het anale kanaal of het rectum is verplaatst en de plug er niet uit is gekomen bij de volgende stoelgang
- Als u in de afgelopen 4 weken een operatie aan de endeldarm heeft ondergaan.

Ernstige bijwerkingen door het gebruik van de Fecal Incontinence Insert moeten worden gemeld aan de fabrikant en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

NO

STAYSURE ANALPROPP FOR AVFØRINGSLEKKASJE-BRUKSANVISNING

BESKRIVELSE:

Innleggsgdelen for avføringslekkasje er en rektoanal innleggsgdel som er ment å hjelpe voksne pasienter (18 år og eldre) og omsorgspersoner i håndteringen av avføringslekkasje. Produktet er utviklet for å forhindre ufrivillig lekkasje av avføring gjennom analkanen.

TILTENKT FORMÅL:

Analproppen er en rektoanal innleggsgdel som er ment å hjelpe voksne pasienter (18 år og eldre) og omsorgspersoner i håndteringen av avføringslekkasje. Produktet er utviklet å bidra til å forhindre ufrivillig lekkasje av avføring gjennom analkanen.

- Grip den utvendige holderen og trekk for å fjerne enheten. (E)
- Kast enheten med vanlig søppel. Det anbefales ikke å skylle ned enheten eller applikeringsinnretningen.
- Vask hendene.

ADVARSEL OG FORHOLDSREGLER:

Avføringslekkasje kan behandles med medisinsk. Analproppen er ikke ment å erstatte kirurgiske alternativer for å behandle utilsiktet tarmlekkasje. Rådfer deg med legen din for profesjonell rådgivning.

- Denne enheten er ikke-steril og kun til engangsbruk. Gjenbruk av enheten kan føre til adoleggelse på enheten.
- Må ikke brukes hvis pakken er åpen eller skadet.
- Må ikke brukes hvis du har en silikonallergi.
- Må ikke brukes med stikkpiller.

TILTENKTE BRUKERE:

Analproppen er tiltenkt brukt av voksne pasienter (18 år og eldre) og omsorgspersoner.

PASIENTMÅLGRUPPE (TILTENKT BEHANDLET POPULASJON):

Voksne (18 år og eldre) med utilsiktet avføringslekkasje.

KLINISCHE FORDELER:

Analproppen er konstruert for å forhindre ufrivillig lekkasje av avføring gjennom analkanen.

YTELSESEGENSKAPER:

Analproppen tilpasser seg den anorektale overgangen og analkanalen for å forhindre utilsiktet avføringslekkasje.

KONTRAIINDIKASJONER:

Analproppen er kontraindisert for bruk hos barn.

Innlegget for fekal inkontinens er kontraindisert for bruk hos pasienter med følgende tilstander:

- Anamnese med analfissur, innvendige hemorroider klasse III-IV eller eksterne hemorroider med trombose i løpet av de siste 6 månedene
- Anal eller rektal smerte og/eller rektal blødning i løpet av den siste måneden
- Anamnese med fekal komprimering med overleppdiaré i løpet av de siste 6 månedene
- Anamnese med ileo-anal pose

RISIKOFAKTORER:

- Mulig mild irritasjon eller ubehag i anus eller analkan
- Mulig migrering eller forskyvning av innleggsgdelen i analkanen og rektum
- Uventet utstøting

STØRRELSESVÅLG:



Denna medicintekniske produkt är avsedd för engångsbruk och förs in i analkanen och ändtarmen via ändtarmsöppningen. Produkten kommer i kontakt med och anpassar sig till den anorektala övergången och analkanalen för att kontrollera ofrivilligt läckage av avføring.

BRUKSVARIGHEIT:

Analproppen kan brukes i opptil 24 timer. En enkel analpropp kan brukes til neste tarmbevegelse eller byttes etter eget ønske. Etter at analproppen er støttet ut, kan du erstatte den med en annen. Kun én analpropp kan brukes om gangen.

INNFØRING:

- Vask hendene.
- Åpne pakken med analproppen og fjern enheten.
- Plasser deg selv i en avslappet, komfortabel stilling, for eksempel liggende på en seng. Ta tak i applikeringsinnretningen og enhetsholderen. (A) Tilpass enheten i henhold til anus.
- Slapp av musklene og sett forsiktig inn analproppen til holderen
- Trekk applikeringsinnretningen ut og kast applikeringsinnretningen og emballasjen med vanlig søppel (D)
- Vask hendene.

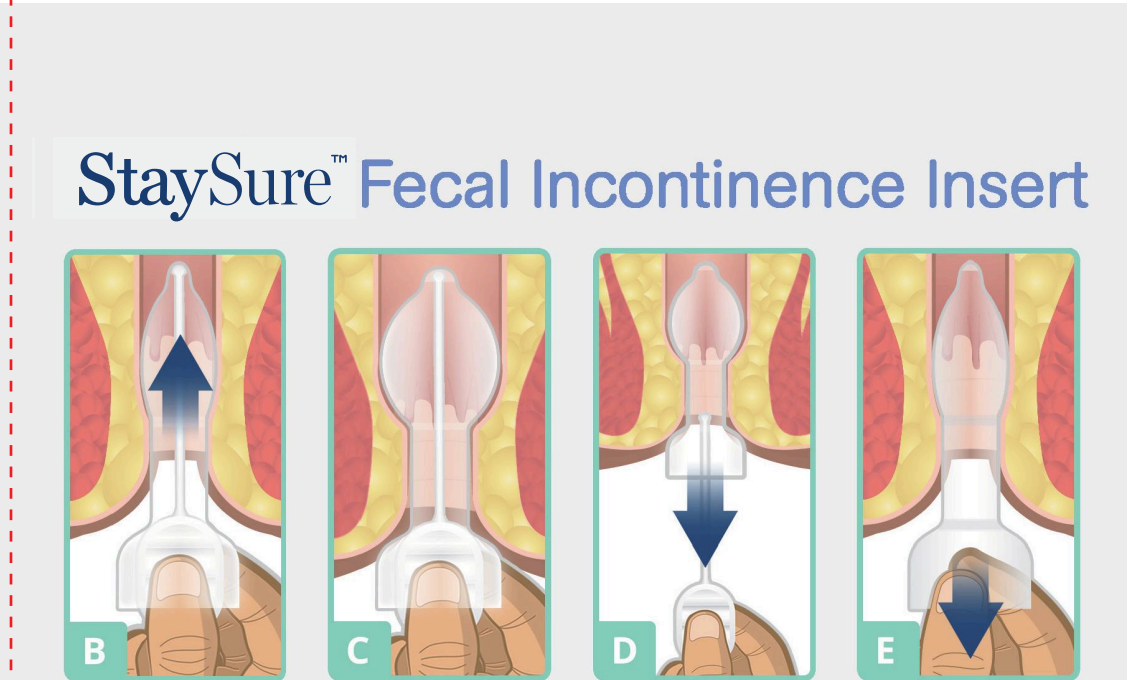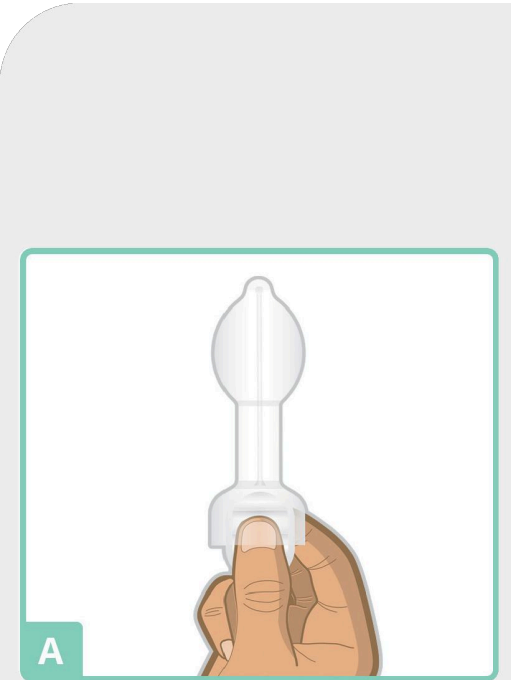

RESULTATKARAKTERISTIKA:
Fecal Incontinence Insert anpassar sig till den anorektala övergången och analkanalen för att förhindra ofrivilligt avföringsläckage.

KONTRAIINDIKATIONER:

StaySure Fecal Incontinence Insert är kontraindicerad för användning på barn.

Fekal inkontinensinlägg är kontraindicerat för patienter med följande tillstånd:

- Historik med analfissur, grad III-IV inre hemorroider eller trombotiserade externa hemorroider under de senaste 6 månaderna
- Anal eller rektal smärta och/eller rektal blödning under den senaste månaden
- Historik av avföringsimpaktion med diarré under de senaste 6 månaderna
- Historik av ileoanal ficka

RISIKER:

- Möjlig mild irritation eller obehag i ändtarmsöppning eller analkan
- Möjlig lägesändring av analproppen in i analkanal och ändtarm
- Analproppen glider ut ofrivilligt

STORLEKAR:

StaySure Fecal Incontinence Insert finns i flera storlekar. Vi rekommenderar att du börjar med den minsta storleken såvida inte din läkare har sagt något annat. Om du upplever läckage vid dina dagliga aktiviteter eller om analproppen oväntat glider ut bör du prova en större storlek.

ANVÄNDNINGSTID:

StaySure Fecal Incontinence Insert kan användas kontinuerligt i upp till 24 timmar. En analpropp kan användas från till nästa tarmtömning eller bytas ut vid behov. När en analpropp har stöts ut kan du ersätta den med en ny. Använd endast en analpropp i taget.

INFÖRANDE:

- Tvätta händerna.
- Öppna paketet med StaySure Fecal Incontinence Insert och ta ut analproppen.
- Hitte en avslappnad, bekväm position – du kan till exempel ligga på en säng. Ta tag i applikatorn och analproppens hållare. (A) Rikta analproppen mot ändtarmsöppningen.
- Slappna av och för försiktigt in StaySure Fecal Incontinence Insert tills handtaget visar mot ändtarmsöppningen (B) (C)
- Dra ut applikatorn och kasta den och förpackningen som vanligt hushållsavfall (D)
- Tvätta händerna.

AVLÄGSNANDE:

StaySure Fecal Incontinence Insert är utformad så att den kan glida ut vid en normal tarmtömning eller avlägsnas manuellt. För enkelhets skull rekommenderar vi att analproppen tas bort innan tarmtömning. Manuellt borttagning:

- Ta tag i det externa handtaget och dra försiktigt för att ta bort analproppen. (E)
- Kassera analproppen som vanligt hushållsavfall. Spola inte ner analproppen eller applikatorn i toaletter.
- Tvätta händerna.

VARNINGAR OG FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Avföringsinkontinens kan behandlas medicinskt. StaySure Fecal Incontinence Insert är inte avsedd att ersätta kirurgiska alternativ för att behandla ofrivilligt avföringsläckage. Kontakta din läkare för medicinsk rådgivning.

- Denna produkt är icke-steril och endast avsedd för engångsbruk. Återanvändning av analproppen kan leda till den går sönder.
- Använd inte om förpackningen är öppnad eller skadad.
- Använd inte om du är allergisk mot silikon.
- Använd inte tillsammans med stölpiller.